


Устройство инфузионное однократного применения с пластиковой иглой

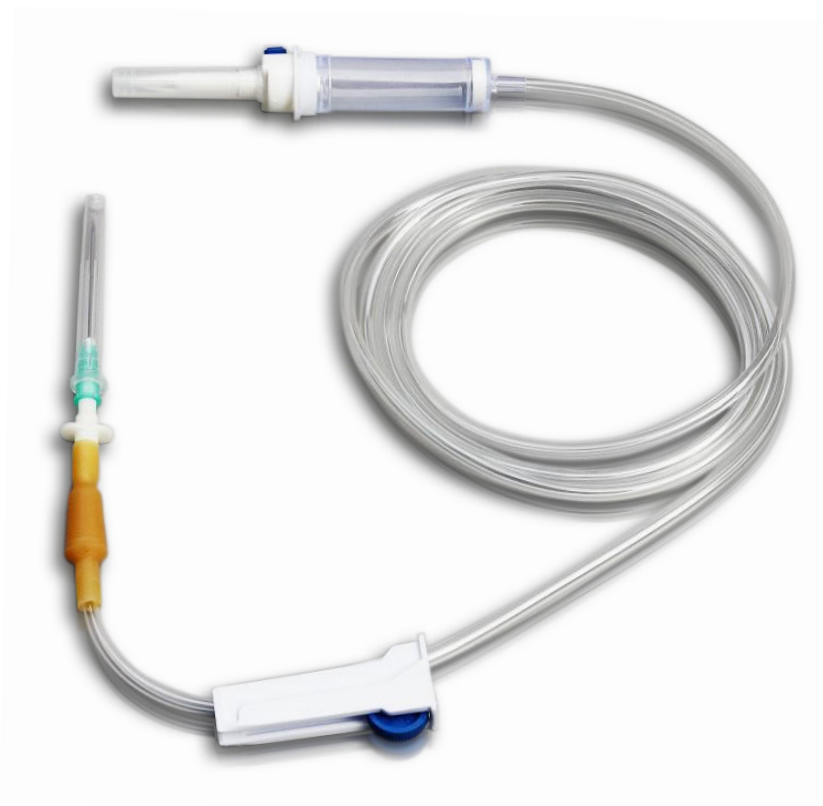


Изготовитель

SF Medical Products GmbH, Германия

Описание продукта

-  Устройство инфузионное однократного применения с пластиковой иглой и инъекционной иглой 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм) предназначено для гравитационного вливания инфузионных растворов из стеклянных флаконов или пластиковых контейнеров. Является стерильным и апиrogenным. Применяется только для медицинских целей. Устройство состоит из пластиковой заборной иглы, интегрированной в каплеобразующую камеру, прозрачной гибкой трубки, гибкого инъекционного узла, коннектора типа Луер и инъекционной иглы.
-  Заборная пластиковая игла имеет три боковых и одно центральное отверстие, расположенные на разных уровнях, а также встроенный воздушный клапан для очистки воздуха. Воздушный клапан оснащен водонепроницаемой антибактериальной мембраной.
-  Каплеобразующая камера является прозрачной, что позволяет контролировать уровень жидкости и последовательность каплепадения. Длина инфузионной трубки 150-160 см. Роликовый зажим позволяет производить плавную и точную регулировку скорости инфузии.
-  Игла 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм) имеет трехгранную лазерную заточку и силиконовое покрытие для снижения травматичности и болезненности при проникновении в ткани.
-  Маркировка упаковки содержит всю информацию, необходимую для идентификации и безопасного использования медицинских изделий.

Устройство инфузионное однократного применения с пластиковой иглой

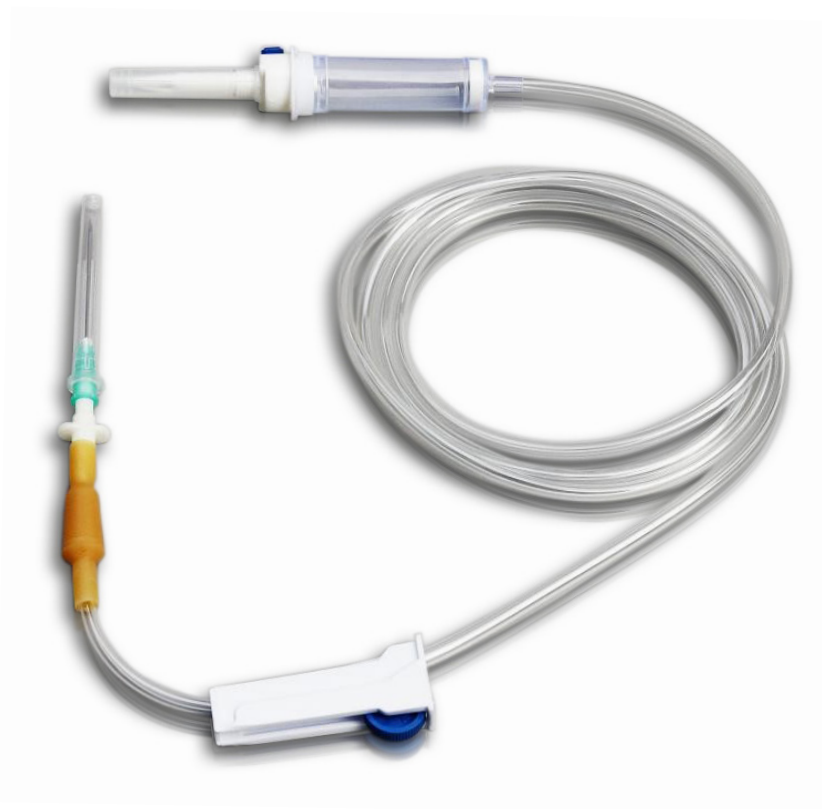

Изготовитель

SF Medical Products GmbH, Германия

Материал:

- Заборная пластиковая игла: АБС-пластик
- Каплеобразующая камера: медицинский поливинилхлорид
- Прозрачная инфузионная трубка: медицинский поливинилхлорид
- Гибкий инъекционный узел: латексный каучук
- Инъекционная игла: медицинская нержавеющая сталь

Качество:

Производитель имеет сертифицированную систему менеджмента качества ИСО 13485

Устройство инфузионное соответствует стандарту ISO 8536-4, ГОСТ 25047

Свойства продукта:

Устройство инфузионное однократного применения с пластиковой иглой обладает следующими функциональными характеристиками:

- Стерильность и апирогенность;
- Пластиковая заборная игла;
- Регулируемая с помощью роликового зажима скорость инфузии;
- Гибкий узел для инъекций;
- Прозрачная соединительная трубка;

Медицинское изделие предназначено только для медицинских целей

Срок годности: 5 лет

Стерилизация: газовая (этиленоксид)

Наименование изделия	Размер иглы	Диаметр иглы, мм	Длина иглы, мм	Цветовая кодировка иглы	Количество в групповой упаковке	Артикул
<i>Устройство инфузионное однократного применения с пластиковой иглой</i>						
Устройство инфузионное однократного применения с пластиковой иглой	21G x 1½"	0,8	40	тёмно-зелёный	25	10.102.020

 Маркировка продукции:

STERILE EO